

Talegenkendelse med Dragon

Author

Henrik Wind

Version

1.0

Date

2024-07-02

Document ID

MAXM-297-462

Omilon A/S

CVR-nr 11735347

Hedeager 3, 1. Mf., 8200 Aarhus N

Indholdsfortegnelse


1	Om talegenkendelse	3
2	Talegenkendelse	4
3	Dragon	4
4	Opret og arbejde med tekst	5
5	Korriger fejl og rediger tekst	6
6	Stemmekommandoer	6
7	Standardtekster/auto-tekster	7
8	Leksikon	8
8.1	Tilføj nye ord	8
8.2	Forbedre genkendelsen på kendte ord	9
9	Trin-for-trin-kommandoer	9
10	Indstillinger	11
10.1	Standard mikrofonopsætning	11
10.2	Alternativ/personlig opsætning	12
11	Onlinehjælp	13

1 Om talegenkendelse

Tillykke med dit nye talegenkendelsesprogram. Kort fortalt laver programmet lyd om til tekst.

For hver lyd programmet hører, anvendes stemmeprofilen, sprogmodellen og ordbogen for at kunne give dig den bedst mulige genkendelse.

Hver bruger har en personlig stemmeprofil og sprogmodel, som løbende udvikler sig og sikrer, at brugeren oplever at genkendelsen hele tiden forbedrer sig i takt med, at programmet anvendes.

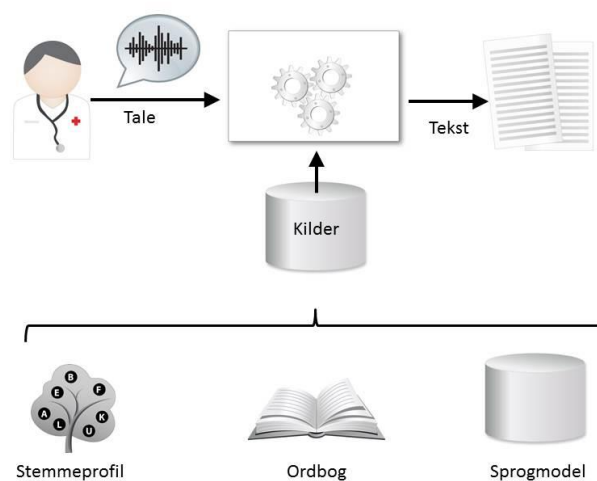

- Stemmeprofilen indeholder din akustiske profil. Altså din dialekt, accent osv.
- Sprogmodellen indeholder viden om, hvordan du normalt danner sætninger. Dette bruges af talegenkendelsen til at øge sandsynligheden for korrekt genkendelse.
- Ordbogen er en generel medicinsk ordbog, hvor du selv har mulighed for at tilføje personlige ord.

2 Talegenkendelse

Talegenkendelse fungerer bedst i rolige omgivelser, men da det ikke altid kan lade sig gøre er her nogle gode råd, så du stadig oplever en god godkendelse.

- Tal i et jævnt tempo med normal og klar stemme (ikke i korte stød). Det er ikke nødvendigt at overartikulere
- Tænk inden du taler, det giver et bedre flow og bedre genkendelse
- Hvis du oplever dårlig genkendelse, skal du ikke tale højere eller langsommere, men forsætte i din normale dikteringsstil og tone
- Undgå at puste/trække vejret tungt i mikrofonen og tøve med 'Øhmm'
- Undgå overflødig tale, fx 'Tak, slut på notat'
- Husk at udtale tegnsætning, punktum, komma, udråbstegn og lignende
- Vent ikke på at teksten kan ses på skærmen
- Brug altid en godkendt mikrofon og hold den i samme afstand 5-10 cm fra munden

3 Dragon

Åbn Dragon (Dragon Medical One).

Log ind med dit brugernavn samt adgangskode.

Dragon er det lille program på din computer, som giver dig mulighed for talegenkendelse.

Alle funktioner er samlet i den blå boks. Nedenfor kan du se, hvad de forskellige symboler betyder.



Talegenkendelsen kan ske på to måder.


I nogle programmer sker talegenkendelsen direkte på cursorposition. Det vil sige direkte i det program, hvor du ønsker at lave din dokumentation.

I andre tilfælde åbner Dragon automatisk et selvstændigt tekstfelt, som kaldes "dikteringsboksen", hvor den talegenkendte tekst bliver skrevet. Derefter kan teksten overføres til cursorpositionen med kommandoen 'Overfør tekst'.

Talegenkendelsen udvikler sig løbende og bliver hele tiden bedre og bedre til dit sprog, og den kontekst du normalt arbejder i. Altså jo mere du anvender talegenkendelse, jo bedre vil din genkendelse blive.

Programmet bruger din korrigerede tekst til at læring for at udvikle din talegenkendelse. Derfor er det vigtigt, at du altid laver korrektur på den talegenkendte tekst.


4 Opret og arbejd med tekst

- 1) Åbn Dragon ved at klikke på  på skrivebordet eller fra Programmer under Start. Log ind med dine brugeroplysninger. Kontroller du har valgt den rigtige mikrofon og ordbog.
- 2) Placer markøren, hvor teksten skal skrives.
- 3) Start optagelsen på mikrofonen og diktér.

Hvis Dragon kan tale sammen med det program, du gerne vil lave tekst i, kommer teksten direkte ved din cursorposition. Ellers åbnes dikteringsboksen, hvorfra du efterfølgende kan overføre teksten til det ønskede program. Det gøres med kommandoen 'Overfør tekst' eller ved at trykke på overførselsknappen på mikrofonen.

Har du brug for at føre teksten tilbage til Dragon-tekstvinduet, bruges kommandoen 'Tilbagefør tekst'.

Tekst, du har dikteret i mellemtiden i Dragon-tekstvinduet, vil blive overskrevet. Teksten slettes *ikke* i det program, hvor du allerede har indsat det.

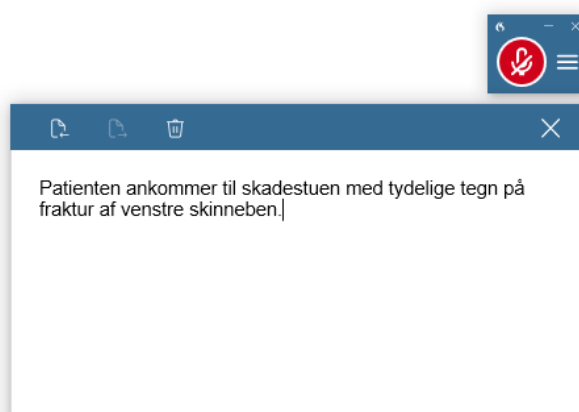

Når du ikke optager, er mikrofon-ikonet rødt. Når mikrofonen er aktiv, skifter ikonet til grønt.



5 Korrigere fejl og rediger tekst

En korrektion er, når du manuelt ændrer tekst, der er blevet fejlagtigt genkendt eller fjerner tekst, som du ikke vil have.

Hvis der er flere fejl i en sætning, kan du enten markere sætningen og sige den igen eller korrigere ved hjælp af tastaturet. Du skal *altid* huske at lave korrektur.

Hvis genkendelsen sker i dikteringsboksen, skal du altid korrigere teksten og rette fejl, inden du overfører teksten. Det er en forudsætning for, at talegenkendelsen kan blive bedre. Ret en tekst ved at markere den og korrigere ved hjælp af tastaturet, ved at markere den og gentage indholdet eller med stemmekommandoen {Korriger 'XXX'}.



- Du kan rette ved hjælp af tastaturet
- Du kan markere tekst og derefter optage for at overskrive den eksisterende tekst med nyt indhold
- Du kan placere cursoren, hvor du vil, for at tilføje mere tekst
- Du kan sige {Korriger 'XXX'}

6 Stemmekommandoer


Du kan styre Dragon og din computer ved hjælp af stemmen. En række handlinger kan udføres via stemmekommandoer (i stedet for med musen, tastaturet eller mikrofonens knapper). Det kan være med til at lette dit arbejde.

Vi anbefaler, at du lærer de kommandoer, der er mest nyttige. Fx hvis du har behov for at korrigere den sidst indtalte tekst, kan du sige 'Slet dette' og indtale den ønskede tekst igen.

Af andre nyttige stemmekommandoer kan fx nævnes:




- Slet ordet (sletter det ord, som cursoren står i)
- Slet dette (sletter den sætning, som cursoren står i, eller den markerede tekst)
- Korriger 'XXX' (markerer det/de valgte ord og foreslår alternativer)
- Gå til slutningen af afsnittet (navigerer til slutningen af det afsnit, cursoren står i)
- Næste felt (navigerer til det næste felt i en auto-tekst)
- Bekræft standardværdier (fjerner kantede parenteser i en auto-tekst)
- Ny linje (cursoren hopper en tak ned)
- Nyt afsnit (cursoren hopper to takker ned)
- Fortryd dette (svarer til CTRL+Z)
- Administration af Leksikon (åbner Leksikon, hvor du kan træne nye ord)


For at se den komplette liste over stemmekommandoer anvendes kommandoen {Hvad kan jeg sige} eller der kan klikkes på  og efterfølgende menupunktet 'Hvad kan du sige'.

7 Standardtekster/auto-tekster

Med standardtekster kan du nemt oprette skabeloner, som du kan indsætte med en stemmekommando. Standardtekster hjælper dig til at spare tid, især hvis du ofte dikterer det samme.


For at oprette eller ændre en standardtekst skal du klikke på  og derefter på menupunktet 'Administration af auto-tekster'.

1. Klik på plus-ikonet for at tilføje en standardtekst.
2. Giv standardteksten et navn.
Evt. udfyld beskrivelsen, hvis du ønsker en hjælpetekst, som fortæller hvad standardteksten anvendes til.
3. 'Talt form' udfyldes automatisk med navnet på standardteksten, *men* du kan angive en valgfri kommando, som erstatter den oprindeligt foreslåede stemmekommando.
4. Indholdet er selve teksten, der vil blive indsat. Her indtaster, indtaler eller indsætter du ønsket tekst.
5. Klik på 'Anvend alle' for at gemme.

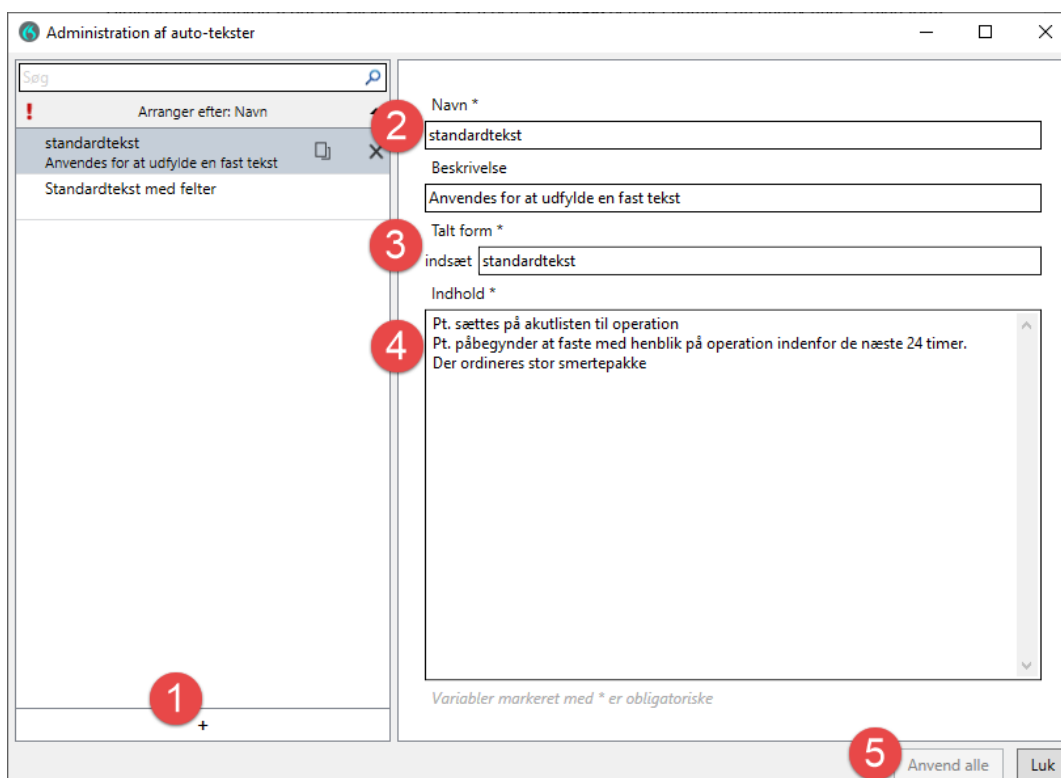


For at anvende en standardtekst stiller du cursoren, hvor du vil indsætte teksten.

Sig 'indsæt + navnet på standardteksten', du ønsker at anvende.

Du kan gøre standardtekster mere avancerede og anvendelige ved at anvende foruddefinerede felter. Klik på  og menupunktet 'Hjælp'.

Se derefter afsnittet 'Arbejde med auto-tekster', hvor du kan læse mere om, hvordan du anvender variabler/felter i dine standardtekster.


8 Leksikon

Du kan tilgå Leksikon fra menuen  eller med stemmekommandoen {Administration af Leksikon}. I Leksikon kan du:

- tilføje nye ord, som programmet skal kunne genkende
- forbedre genkendelsen af eksisterende ord

Alle ændringer i Leksikon gælder på brugerniveau og har ikke indflydelse for andre brugere.

8.1 Tilføje nye ord

Du kan opleve at ord, du har behov for, ikke er i ordbogen. Det kan fx være navne på institutioner, afdelinger, virksomheder eller lignende. For at tilføje et nyt ord tilgår du Leksikon fra menuen  eller med stemmekommandoen {Administration af Leksikon}.

Klik på 'Tilføj'. Indtast ordet, du ønsker at tilføje. Vær opmærksom på ordet altid vil blive skrevet på præcis den måde, som du tilføjer det. Så brug kun store bogstaver, hvis ordet altid skal skrives med stort.

Programmet laver en udtale til ordet, som du ønsker at tilføje. Udtalen vil blive dannet ud fra almindelig dansk udtale.

Hvis ordet, som du tilføjer, har en særlig udtaleform fx engelsk, fransk, tysk eller lignende, kan du vælge at lægge din egen lyd på ordet.

Standardudtale

For at anvende standardudtale klikkes på 'Brug standardudtale'.

Egen udtale

For at tilføje din egen udtale klikkes på mikrofon-ikonet, og du indtaler ordet, som du normalvis ville sige det. Efterfølgende klikkes der på 'Bekræft'.

8.2 Forbedre genkendelsen på kendte ord

For at forbedre genkendelse på ord, som allerede er en del af ordbogen, følges vejledningen ovenfor med 'Egen udtale'.

9 Trin-for-trin-kommandoer

Det er muligt at lave personlige kommandoer, som kan udføre flere tastaturtryk og evt. indsætte data eller tekst med en enkelt stemmekommando.

Det vil sige, hvis du har mange klik for at komme hen til en bestemt funktion i dit journalsystem, kan det måske automatiseres, hvis journalsystemet har genvejstaster for de samme handlinger.


Eksempel (fiktivt)

I forbindelse med udfyldelsen af en journal, kan det være, at du skal lave en henvisning.

Her ville du formentlig trykke på flere genvejstaster for at komme hen til det rigtige sted for at oprette henvisningen.

Det kan evt. gøres med en stemmekommando. Klik på menuen  og derefter 'Administration af trin-for-trin-kommandoer'.

1. Klik på plustegnet for at tilføje en ny trin-for-trin-kommando.
2. Giv trin-for-trin-kommandoen et navn.
Evt. udfyld beskrivelsen, hvis du ønsker en hjælpetekst, som fortæller hvad trin-for-trin-kommandoen anvendes til.
3. 'Talt form' udfyldes automatisk med navnet på trin-for-trin-kommandoen, *men* du kan angive en valgfri kommando, som erstatter den foreslåede stemmekommando fx 'Opret til hudlæge', som i det viste eksempel.
4. Under Trin tilføjes de forskellige trin, som kommandoen skal udføre.
Klik på Nyt trin for at tilføje trin.
Du kan læse mere om de forskellige trintyper i Dragons 'Hjælp'.
5. Klik på 'Anvend alle' for at gemme.

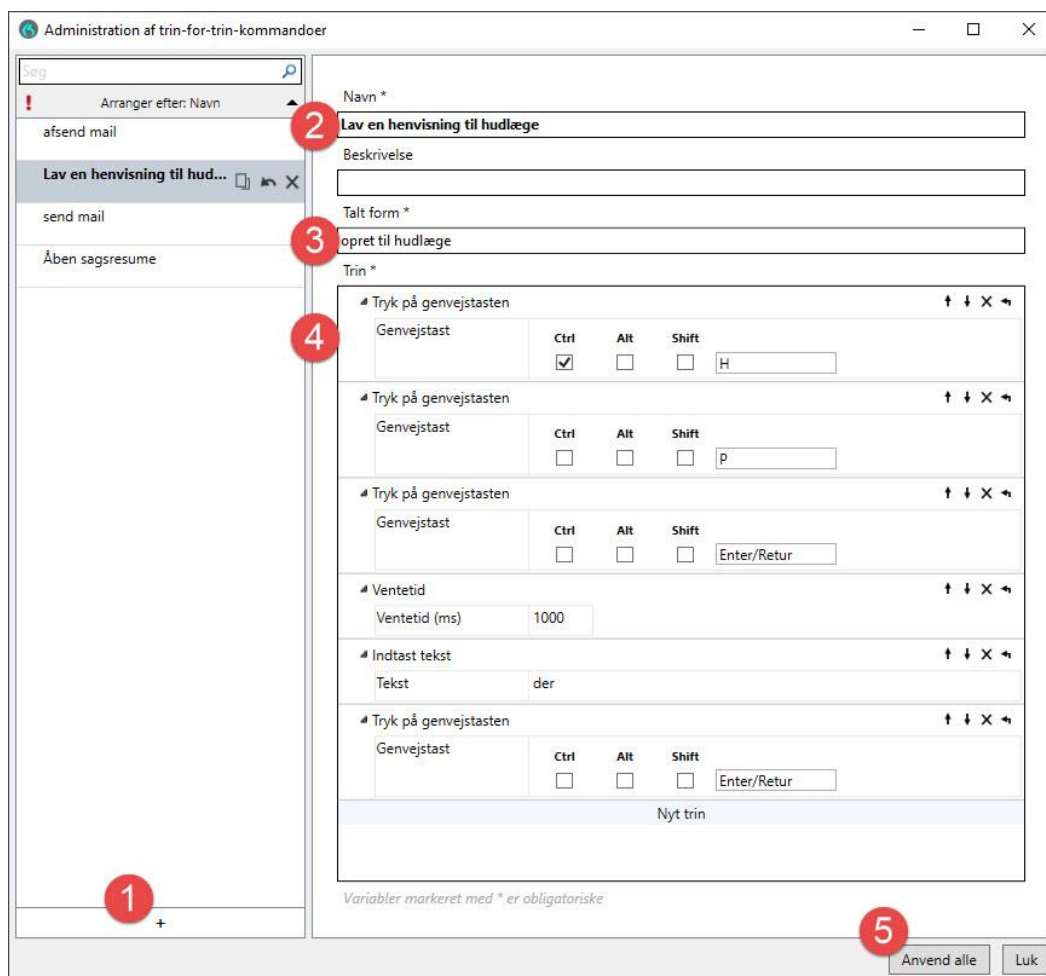


Trintypen 'Tryk på tasterne' skal udfyldes på følgende måde.

Tastaturknap	Skrives som		Tastaturknap	Skrives som
Tilbage	{BACKSPACE} eller {BS}		Minus	{SUBTRACT}
Linjeskift	{BREAK}		Multipliser (*)	{MULTIPLY}
Lås Skift/Caps lock	{CAPSLOCK}		Divider	{DIVIDE}
Scroll Lock	{SCROLL}		F1-F24	{F1} til {F24}
Slet	{DEL} eller {DELETE}		Retur/Enter	{RETUR}
Pil ned	{DOWN}		Hjælp	{HJÆLP}
Pil op	{UP}		Decimaltegn	{DECIMAL}
Venstre pil	{LEFT}		Separator	{SEPARATOR}
Højre pil	{RIGHT}		Mellemrum	{SPACE}
End	{END}		Vælg	{SELECT}
Enter/Retur	{ENTER}		Print	{PRINT}

Esc	{ESCAPE} eller {ESC}		Udfør	{EXECUTE} eller {EXEC}
Home	{HOME}		Øjebliksbillede	{SNAPSHOT}
Insert	{INS}		Annuller	{CANCEL}
Num Lock	{NUMLOCK}		Windows	{WINDOWS} eller {WIN}
Side ned	{PGDN}		Programmer	{APPLICATIONS} eller {APPS}
Side op	{PGUP}		Fjern	{CLEAR}
Tab	{TAB}		Num. Tastetur 0-9	{NUMPAD0} eller {NP0} til {NUMPAD9} eller {NP9}
Tilføj (+)	{ADD}			


10 Indstillinger

Ønskes det at ændre i indstillingerne for Dragon trykker du på  og herefter på 'Indstillinger'. Herinde kan du ændre i generelle indstillinger, dikteringsboksen, genveje og mikrofonknapperne.

10.1 Standard mikrofonopsætning


Som standard er Dragon sat op med nogle standardindstillinger til mikrofonen og dens knapper. Disse kan ses på billedet nedenunder.


Udover at starte og stoppe optagelsen, tillader knapperne på mikrofonen brugeren at udføre få aktiviteter uden brug af tastatur. Her kan man fx overføre den indtalte tekst til cursorens position ved brug af overfør tekst-knappen, som kan ses på standardindstillingerne i billedet herunder.

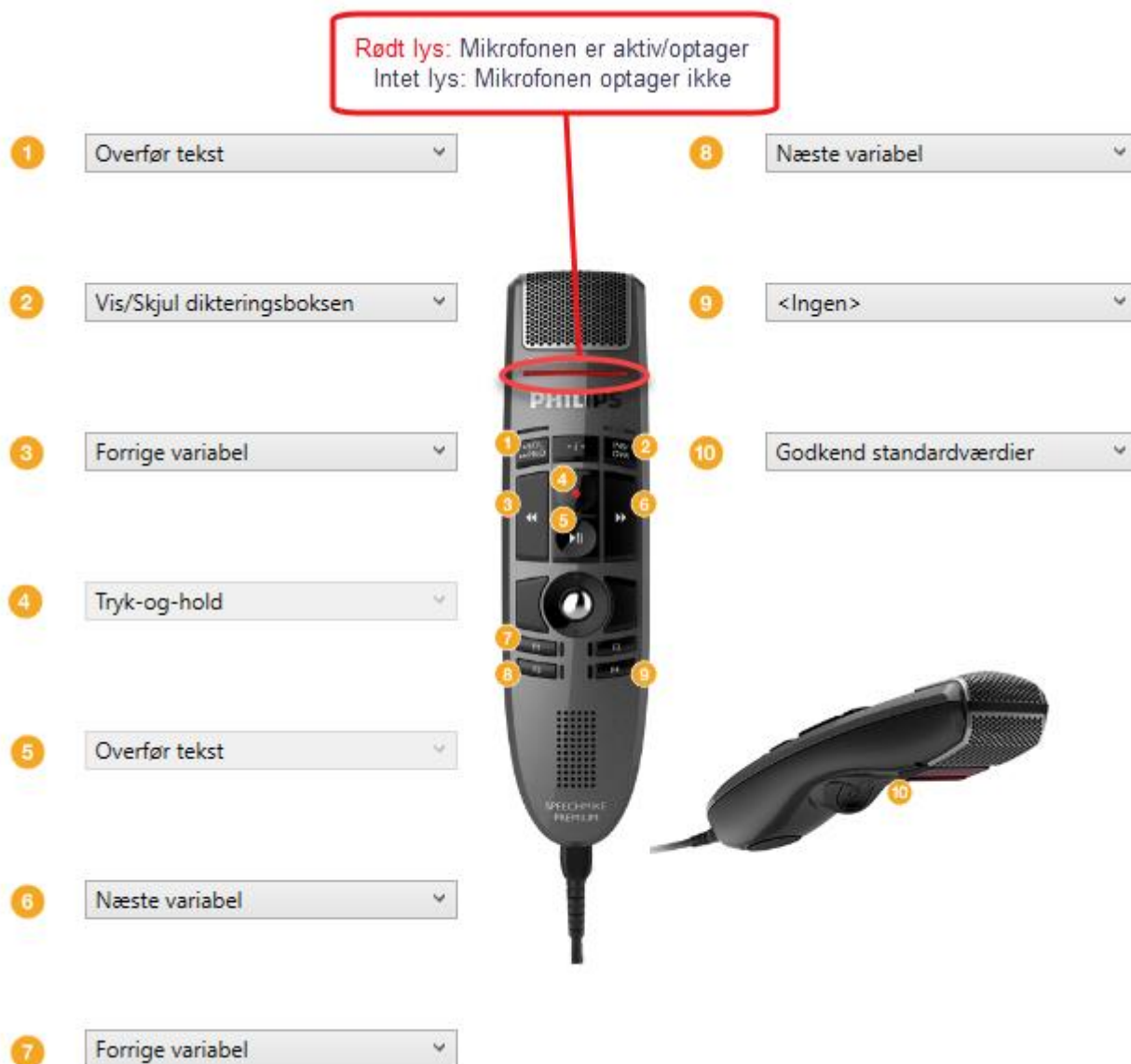


10.2 Alternativ/personlig opsætning

Mikrofonen kan også opsættes med andre funktionsknapper. Her kan man fx knytte en mikrofonknop til en funktion, der hedder 'Ryd dikteringsboksen'. Se nedenstående billede.

Funktionen for alle knapper på mikrofonen kan ændres inde i Dragon-indstillingerne ved at trykke på  og efterfølgende på 'Indstillinger' og til sidst på 'Mikrofonknapper'.

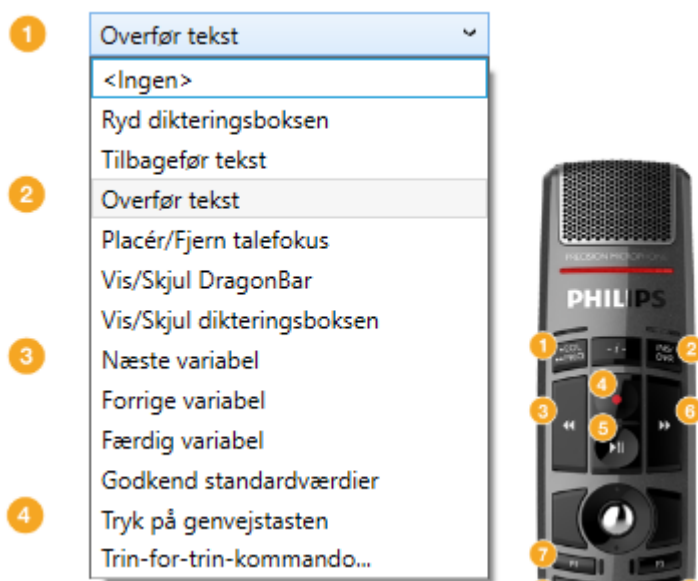


11 Onlinehjælp

Skulle du have brug for hjælp til Dragon, kan der findes mange gode svar i onlinehjælpen. Denne findes ved at trykke på  og herefter på 'Hjælp'.

I onlinehjælpen kan du fremsøge hjælp og information om Dragon og talegenkendelse:



Herudover kan du også finde rådgivning til brug af systemet ved at trykke på  og herefter på 'Hvad kan du sige'.

Hvad du kan sige

- AT Auto-tekster**
Brug standardtekster i stedet for manuel optagelse.
- B Brugerindstillinger**
Foretag ændringer i dine indstillinger.
- D Dragon**
Styr programmet.
- PA Placering af talefokus**
Styr det program, som talefokus er placeret på.
- F Formatering**
Formatér din tekst vha. din stemme.
- AA Administration af auto-tekster**
Opret og rediger auto-tekster vha. din stemme.
- AA Administration af kommandoer**
Opret og rediger kommandoer vha. din stemme.
- BK Brugerdefinerede kommandoer**
Brug stemmekommandoer i stedet for at klikke.
- K Korrektur**
Redigér det du ser på skærmen.
- N Navigation**
Flyt talefokus.
- O Optagelse**
Betjen mikrofonen vha. din stemme.
- PT Personlig tilpasning og hjælp**
Skift fra visning af dit diktat til visning af yderligere oplysninger.